


# PRODUKTSPEZIFIKATION



**Produkt:** SALVEQUICK TEXTILPFLASTER  
(WUNDSCHNELLEVERBAND)  
**Referenznummer:** 6444

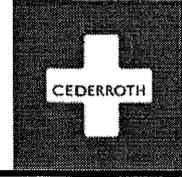

## 1. Allgemeine Beschreibung

Wundschnellverband in zwei Größen, mittelgroß und groß, in einer Refill-Pappverpackung. Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Ein Wundschnellverband besteht aus einer Textil-Außenschicht mit einer ebenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbandes aus der Verpackung bleibt ein Teil der abziehbaren Kunststoffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbandes kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Anschließend kann der andere Teil der abziehbaren Folie entfernt und der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

## 2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.


## 3. Technische Beschreibung

### *Produktabmessungen*


|            |                     |          |
|------------|---------------------|----------|
| Mittelgroß | Wundschnellverband: | 72x19 mm |
|            | Wundkissen:         | 24x19 mm |
| Groß       | Wundschnellverband: | 72x25 mm |
|            | Wundkissen:         | 24x25 mm |

### *Material*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Außenschicht:         | Elastisches, hautfarbendes Textilgewebe  |
| Klebeschicht:         | Hypoallergene Klebeschicht mit Schmelzklebstoffen (synthetischer Kautschuk mit Zinkoxid) |
| Wundkissen:           | Trockenes Nadelvlies mit einer Wundkontaktschicht  |
| Aufzulegende Schicht: | Einseitig silikonisiertes abziehbares Papier/Folie                                       |
| Verpackung:           | Kaltsiegel-Verpackung ohne Aufdruck  |

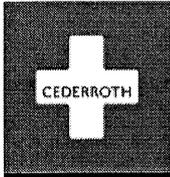

# PRODUKTSPEZIFIKATION

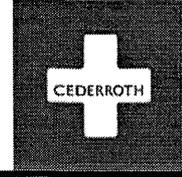

## 4. Zusammensetzung

### *Refill*

| <u>Ref#</u>                 | <u>Produkt/Material</u>                | <u>M.</u>     |
|-----------------------------|--|---------------|
| 45164400                    | Mittelgroßer Textil-Wundschnellverband | 24            |
| 45164401                    | Großer Textil-Wundschnellverband       | 16            |
| Abmessungen (L x B x H) mm: |  | 30 x 87 x 100 |

### *Konsumentenverpackung*

|  |                |
|--|----------------|
| Anzahl Refills in der Transportverpackung: | 6              |
| Abmessungen (L x B x H) mm:                | 100 x 150 x 90 |

### *Transportverpackung*

|  |                 |
|--|-----------------|
| Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung: | 10              |
| Abmessungen (L x B x H) cm:                                | 520 x 160 x 190 |
| Gewicht (kg):  | 2,5             |

## 5. Kennzeichnung

### *Produkt (Refill)*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

### *Transportverpackung*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code, Menge

### *Konsumentenverpackung*

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Web- und E-Mail-Adresse  
Produktname, Referenznummer  
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code  
Menge  
Symbole: CE, LOT, USE BY

## 6. Lagerbedingungen


Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

## 7. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden, ist aber nicht notwendig.

| <u>Ref #</u> | <u>Produktname</u>         |
|--------------|----------------------------|
| 490700       | Salvequick Pflasterspender |

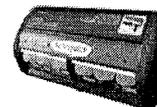

## Genehmigt:

QA&RA Mgr

Digital unterzeichnet von QA&RA Mgr  
DN: cn=QA&RA Mgr, o=Wound Care  
Cederroth AB, ou, E-  
Mail=firstaid@cederroth.com, c=SE  
Datum: 22.12.2010 10:51:23 +01'00'