


PRODUKTSPEZIFIKATION



PRODUKTSPEZIFIKATION

Produkt: SALVEQUICK EXTRA GROSSER
FINGERSPITZEN-
TEXTILWUNDSCHNELLEVERBAND
(PFLASTER)
Referenznummer: 6454

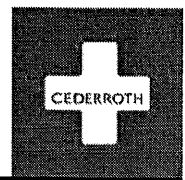

1. Allgemeine Beschreibung

Fingerspitzen-Wundschnellverband in einer Refill-Pappverpackung.
Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Der Wundschnellverband besteht aus einer Textil-Außenschicht mit einer ebenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbands aus der Verpackung bleibt ein Teil der abziehbaren Kunststoffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbands kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Anschließend kann der andere Teil der abziehbaren Folie entfernt und der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.


3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen


Verband	Wundschnellverband:	87x58 (23) mm
	Wundkissen:	15x39 mm

Material

Außenschicht	Elastisches, hautfarbenes Textilgewebe
Klebeschicht	Hypoallergene Klebeschicht mit Schmelzklebstoffen
Wundkissen	Trockenes Nadelvlies mit einer Wundkontaktschicht
Aufzulegende Schicht	Einseitig silikonisiertes abziehbares Papier/Folie
Verpackung	Kaltsiegel-Verpackung ohne Aufdruck

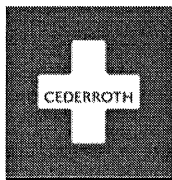

PRODUKTSPEZIFIKATION

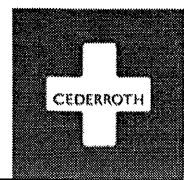

4. Zusammensetzung

Refill

<u>Ref #</u>	<u>Produkt/Material</u>	<u>M.</u>
45164180	Extra großer Fingerspitzen- Textilwundschnellverband	15
Abmessungen (L x B x H) mm:		30 x 87 x 100

Konsumentenverpackung

Anzahl Refills in der Transportverpackung:	6
Abmessungen (L x B x H) mm:	100 x 150 x 90

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung:	10
Abmessungen (L x B x H) mm:	520 x 160 x 190
Gewicht (kg):	2,18

5. Kennzeichnung

Produkt (Refill)

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT, USE BY

Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Web- und E-Mail-Adresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge
Symbole: CE, LOT, USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Webadresse
Produktname, Referenznummer
Chargennummer, Verfalldatum, EAN-Code
Menge

6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden:

Ref #: 1907 Salvequick Pflasterspender

Genehmigt von:

Teija Ålander
Qualitätssicherungsmanagerin

Datum: 1.2.2008